

SeaMed® CAPNO

Kapnograf



Teknik Özellikler

EtCO2

Metod:	Non-dispersive Infrared Absorpsiyon/Spectroscopy
Aralık:	0-150 mmHg veya 0 - 20kPa veya % 0-20
Doğruluk:	±2mmHg, % 2 mmHg

Güncelleme Her nefeste

Bekleme Süresi: 5 sn. Max.

Hafıza 24 saat ve grafik bar

Solunum Sayısı

Aralık:	0 - 150 rpm
Doğruluk:	±1% or ±1 rpm
Hafıza:	24 saat grafik bar
Sensör:	Entübe hasta için adaptör

Airway Adaptör Yetişkin/Pediyatrik Yenidoğan

Ölü Boşluk	5 ml (yetişkin/pediyatrik) 1 ml (yenidoğan)
Şeffaf Pencere Alanı:	5,18 mm
Giriş Çapı:	15 mm - 22 mm
Uzunluk:	53 mm

Ekran

Ekran Boyutu	1,7" Renkli TFT LCD
Ekran İzleme	90° Açılı ile 4 Yönlü İzlenebilir

Güç

AC giriş:	100V - 240V, 50Hz/60 Hz DC: 5 V
Güç Tüketimi:	5W
Batarya:	Lityum batarya(3.7V, 1350mAh)
Şarj süresi:	4 saat
Batarya kullanım süresi:	6 saat

Çevre

Sıcaklık:	5 to 40°C
Atmosferik Basınç:	86 - 106 kPa
Nem:	30% - 75%
Depolama Sıcaklığı:	-20 to +55°C
Depolama Nemi:	<93%
Depolama Atmosferik basınç :	50 - 120 kPa

Fiziksel Data


Boyutlar:	45(W) x 45(H) x 55(D) mm
Ağırlık:	85 gram
Koruma Sınıfı:	Sınıf II // BF // IP33

Alarm

EtCO2 Alarm:	1 - 99 mmHg
Solunum Hızı:	1 - 149 rpm
Apne Süresi :	15-39 sn.

SeaMed® CAPNO

Kapnograf(Mainstream)

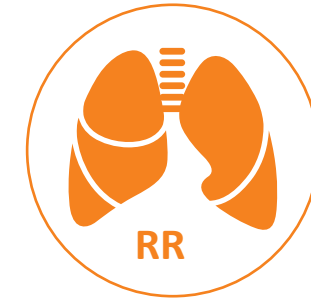

TS EN ISO 21647 IEC 60601-1 CSA601.1 UL2601-1

Batarya Göstergesi
Alarm Durum Sembolü



D Hasta Numarası

End-tidal CO₂
Değeri

Solunum Sayısı

Trend Grafiği
5 saniye gerçek
zamanlı ölçüm

Airway adapter
Yetişkin/Pediatric/
Yenidoğan

Güç tuşu
Servis Menüsü

Özellik

Ambulans, Acil Servis, Yoğun bakım ve Ameliyathanelerde Güvenli Kullanım

EtCO₂, Solunum Hızı izleme, gerçek zamanlı kapnografik izlem

Adaptörler maske, endotrekeal tüpler ve ambular ile uyumlu

Adaptörler steril şekilde paketlenmiş, paket üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi ve LOT numarası mevcuttur

Adaptörler cihaza tam oturur ve oynama yapmaz

Ayarlanabilir Tarih ve Saat Menüsü

Kurulum basit, transport kullanıma uygun ve ergonomik, ölçüm için kablo gerektirmez

Kullanıcı eğitimini kolaylaştırmak için Demo modu,

Dalga formu 2 farklı ölçüm değeri ile izlenebilir, seçilebilir

ETCO₂ ve solunum hızını gerçek zamanlı segmentlerle hareketli olarak gösterir

Yüksek/Düşük ETCO₂, Apne tıkanıklığı durumlarında görsel ve sesli alarm

Alarmlar tek tuş ile 2 dk. susturulabilir



Yetişkin/
Pediatric
Adaptör




Yenidoğan
Adaptör



Elastik Silikon
Koruma Kılıfı



Taşıma Çantası
Askı İpi

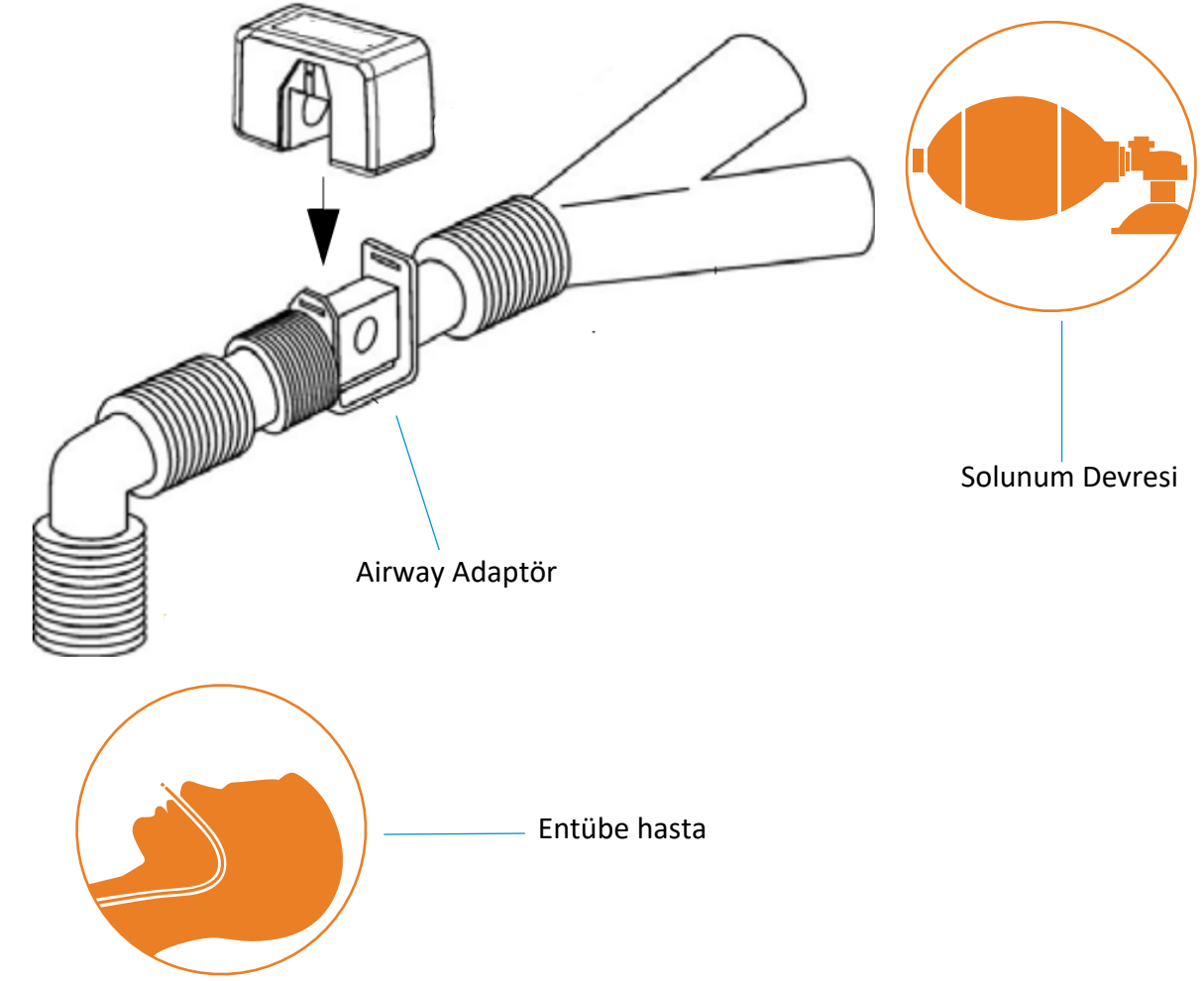

Airway Adaptör

Entübe hasta

Solunum Devresi

OPSİYONEL Veri Yönetim Yazılımı



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

