



OTOSKOP & OFTALMOSKOP



LED Fiber Optik Otoskop


Otoskop, dış ve orta kulak patolojilerini teşhis etmek amacıyla kulak zarı ve dış kulak kanalını görüntülemek için kullanılır. KBB'de en çok kullanılan cihazdır.

- ◆ Fiber optikler ışık sistemini iletir; fiber optikler daha fazla ışık çıkışı ve daha az parlama için cihazın ucuna kadar uzanır.
- ◆ 2,5x büyütme
- ◆ Yeniden Kullanılabilir Kulak Spekülası: Her biri için 2,5 mm ve 4,0 mm, 5. İsteğe bağlı olarak 3mm ve 5mm.
- ◆ İnsüflasyon Portu: İnsüflatör ampulü kullanarak timpanik membranı görüntüleyin.
- ◆ Otoskop, 2 adet AA alkalin veya Li-ion Şarj Edilebilir pil (opsiyonel) ile mevcuttur.
- ◆ Yalnızca LED ampulle kullanın, ampulün modeli L4952, 2,5V, 1,6W'dir.
- ◆ Akıllı tasarım, mobil teşhis için uygundur.



460E0150

Kulak Spekulumları

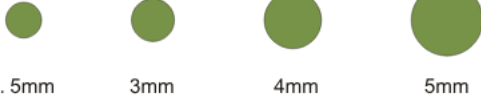

2. 5mm

3mm

4mm

5mm



İnsüflatör-puar

461-0050

LED Fiber Optik KBB Teşhis Seti

	2.5V Otoloscope	K Handles	Desk Charger	Zipper Case
	LED	AA	Li-Ion	
Order Code	460E0150	460-0520460-0570	407-1000	M0
460E781	■	■		■
460E881	■		■	■



461-0050

FİBER OPTİK AYDINLATMALI OTOSKOP

GENEL TIP VE KBB ALETLERİ

Fiber Optik Otoskop & Oftalmoskop Seti



Reusable Spekulum

- ◆ Yeniden kullanılabilir uçlar, 134°C'ye kadar otoklavlanabilir, 10 dakika.
- ◆ Pürüzsüz iç yüzeyli, yüksek yoğunluklu Polipropilenden yapılmıştır.
- ◆ Pozitif kilitleme tasarımı. Otoskop kafasına sıkı uyum.
- ◆ Yalnızca OT8C Fiber Otoskop ile uyumludur.



2.5mm

3mm

4mm

5mm



460-0070 Reusable Ear-Specula, 2.5mm and 4.0mm, 5 for each

460-0074 Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 2.5mm dia. 200 pcs./pack

460-0075 Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 3.0mm dia. 200 pcs./pack

460-0076 Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 4.0mm dia. 200 pcs./pack

460-0077 Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 5.0mm dia. 200 pcs./pack

FİBER OPTİK AYDINLATMALI OTOSKOP

GENEL TIP VE KBB ALETLERİ

LED

3.5V Operasyonel Otoskop



462E0010

- ◆
- ◆
- ◆ Hareketli spekulum tutucusu herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir.
- ◆ Lamba:T3100 or T3100-LED
- ◆ 1.5 X Büyütme



Operasyonel Otoskop için Yeniden Kullanılabilir Kulak Spekulumu

- ◆ Yeniden kullanılabilir uçlar, 134°C'ye kadar otoklavlanabilir, 10 dakika.
- ◆ Pürüzsüz iç yüzeyli, yüksek yoğunluklu Polipropilenden yapılmıştır.
- ◆ Pozitif kilitleme tasarımı. Otoskop kafasına sıkı uyum.
- ◆ Yalnızca OT8C Fiber Otoskop ile uyumludur.



Ear-specula

LED Direkt Oftalmoskop

LED

Direkt oftalmoskop, gözün iç yapılarını, özellikle de retinayı incelemek için kullanılır.

- ◆ Oftalmoskop, AA alkalın veya 2,5V şarj edilebilir Li-ion pil (isteğe bağlı) ile mevcuttur.
- ◆ Akıllı tasarım ve konforlu çalışma.
- ◆ Küçük gözbebeği için uygundur.
- ◆ 0D'den ± 20 D'ye kadar 19 lens: 0D, ± 1 D, ± 2 D, ± 3 D, ± 4 D, ± 6 D, ± 8 D, ± 10 D, ± 15 D, ± 20 D.



Red-free filter, hemispot, small spot, large spot, Fixation aperture



405E0150



KOMBİNE TEŞHİS SETLERİ

DUVARA MONTE TEŞHİS SETİ



485-1050

DW1050 Set şunları içerir: 3,5V Koaksiyel Oftalmoskop, 3,5V Fiber Otoskop, 485 Duvara Montajlı Transformatör, saplı, Spekulum dağıtıcı, Kulak-aynacı (2,7 mm ve 4,2 mm, her biri 35 adet), Tansiyon Aleti, Kulak Termometresi, Fişli güç kablosu , Ahşap plaka (büyük boy), Karton Kutu.